

Toiles de lève-personne

INSPECTION PRÉVENTIVE

À VÉRIFIER AVANT CHAQUE UTILISATION


Ces informations sont mentionnées dans votre formation PDSB chez Groupe Intervention Santé inc

Absence de déchirure,
d'usure excessive,
d'effilochage et
de rétrécissement
de la toile et
des courroies

Coutures des attaches et
de la toile en bon état

Présence de l'étiquette
du fabricant indiquant
la taille de la toile,
la charge maximale,
la marque et
le numéro de modèle

Tester la solidité
des courroies et des attaches

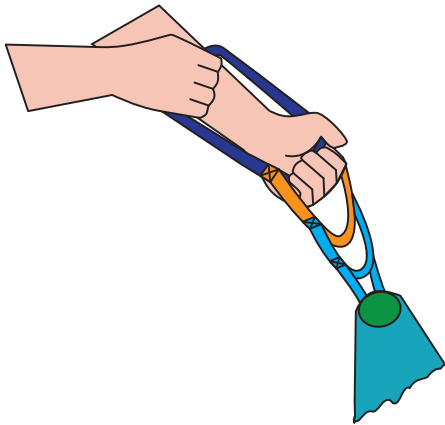

Toute réparation doit être
exécutée par le fabricant

Cessez l'utilisation de toute toile
non conforme, retirez-la de la circulation
et avisez votre supérieur immédiat.

A S S T S A S



Association paritaire pour
la santé et la sécurité du travail
du secteur affaires sociales

www.asstas.qc.ca